



深圳市明鉴检测专业技术有限公司
Shenzhen Mingjian Testing Professional Technology Co., Ltd



检测报告

报告编号: MJ251220-032

委托单位: 苏州华辰生物科技有限公司

报告日期: 2026.01.07



说 明

- 一、申请方如对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 二、本报告所出具的数据和结论仅适用于收到的样品。
- 三、本报告不得涂改、增删，部分复制无效。
- 四、未加盖检测报告专用章或无授权签字人签字的报告无效。
- 五、本报告用于产品标签、广告和商品宣传时，应符合相关法律法规的要求，并不得损害本公司利益。
- 六、样品名称、批号、样品类型及来源等为委托方提供的信息，本检测机构不对其有效性和真实性负责。
- 七、本检测报告中以“*”标注的检测项目未经 CNAS 认可。
- 八、本公司根据 CMA、CNAS 相关规定，按要求在本检测报告中以“#”标注由分包方完成的检测项目，并对分包情况作必要说明。

联系人： 报告管理员

电 话： 400-9919863

邮 编： 518057

邮 箱： report@mingjiantech.com

地 址： 深圳市南山区高新科技园北区源兴科技大厦东座三楼

深圳市明鉴检测专业技术有限公司
检测报告



报告编号：MJ251220-032

委托编号	MW251220-022	样品编号	S251220-032
样品名称	间充质干细胞化学成分 限定培养基 (CD03F+CD03S)	样品批号	20251205
送检单位	苏州华辰生物科技有限公司		
委托单位	苏州华辰生物科技有限公司		
联络信息	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号播禾 创新中心 A3-504-1		
样品情况			
样品类型	样品规格	样品数量	样品状态
完全培养基	5 ml/支	1 支	液体
收样日期	2025.12.20	检测日期	2025.12.29 - 2026.01.05
检测依据	见“检测结果”——“检测方法”栏。		

检测结果			
检测项目		检测方法	结果
【蛋白检测】			
人β血栓环蛋白（β-TG）含量		《中国药典》2025 版三部通则 3429 免疫化学法：酶联免疫吸附法	<2 ng/mL（定量限）
人血小板膜蛋白 CD41（GP-CD41）含量		《中国药典》2025 版三部通则 3429 免疫化学法：酶联免疫吸附法	<6.25 ng/mL（定量限）
备注		数据分析图表详见附件。	
检测说明		样品按约定方法检测上述检测项目，结果如上所述。	
编制人		审核人	高伟
授权签字人		签发日期	2026.01.07



以下空白——

深圳市明鉴检测专业技术有限公司

检测报告



报告编号：MJ251220-032

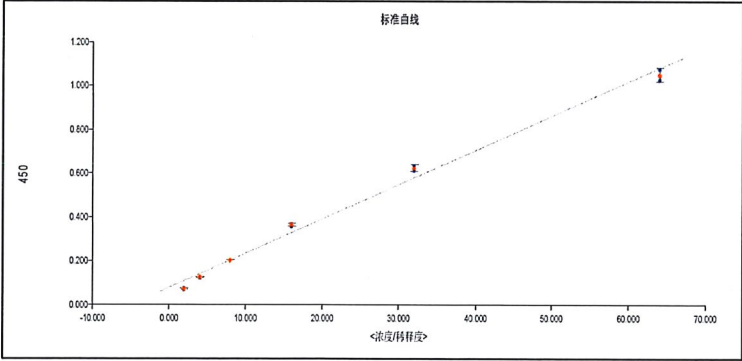
附件：

一、蛋白检测

人β血栓环蛋白（β-TG）含量（ELISA）

采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附（ELISA）试剂盒，检测样品中人β血栓环蛋白（β-TG）含量，检测结果见下表：

人β血栓环蛋白（β-TG）含量检测结果

样品信息	20251205（S251220-032）		
人β-TG 含量 检测结果	<2 ng/mL（定量限）		
标准曲线 拟合参数	拟合方程：Y=A*X+B		
	A	B	R ²
	0.0157	0.0792	0.992
标准曲线  标曲曲线			
检测起止日期	2026.01.05 - 2026.01.05		
备注	/		

——以下空白——

深圳市明鉴检测专业技术有限公司

检测报告



报告编号：MJ251220-032

人血小板膜蛋白 CD41（GP-CD41）含量（ELISA）

采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附（ELISA）试剂盒，检测样品中人血小板膜蛋白 CD41（GP-CD41）的含量，检测结果见下表：



人血小板膜蛋白 CD41（GP-CD41）含量检测结果

样品信息	20251205（S251220-032）		
人 GP-CD41 含量 检测结果	<6.25 ng/mL（定量限）		
标准曲线 拟合参数	拟合方程：Y=A*X+B		
	A	B	R ²
	0.00842	0.023	0.998
标准曲线 标曲曲线			
检测起止日期	2025.12.29 - 2025.12.29		
备注	/		

——以下空白——